

QUICKIE BREEZY

Une valeur sûre à un prix exceptionnel.



**FAUTEUIL ALUMINIUM
PLIANT, LÉGER.**

Flasques



Fixations des fourches renforcées
pour plus de stabilité.

Coloris de châssis



Bleu



Gris
martelé



Rouge
métal



Vert
Anglais





BREEZY by Quickie

- 14 kg (sans équipement).
- 4 coloris de châssis.
- Plusieurs largeurs, profondeurs et hauteurs de dossier.
- Potences amovibles 60° et 70°
- *Options :*
 - dossier cassant
 - système double main courante
 - roulettes anti-bascule

La qualité technique du fauteuil Breezy se caractérise, comme pour tous les fauteuils Quickie, par des tubes en aluminium et des fixations de haute qualité, et par des roulements scellés sur l'ensemble du fauteuil.

Le Breezy est doté d'accoudoirs relevables et de repose-pieds escamotables pour faciliter les transferts ; il peut être utilisé en configuration surbaissée (podale) grâce à des supports d'axe 2 positions, des roues 22" (hauteur sol/siège arrière) et des roues 5 ou 6" avec des fourches de 135 mm (hauteur sol/siège avant).

Solide, fiable et léger, le Breezy vous offre à un prix modeste, toutes les qualités d'un fauteuil Quickie. Il allie durabilité, fonctionnalité et performance.



Les accoudoirs se relèvent pour faciliter les transferts et se bloquent bien en place pour offrir une réelle sécurité.





Les repose-jambes articulés permettent de placer les jambes dans une position ergonomique correcte.

CARACTERISTIQUES

A	Hauteur sol/siège avant	38,5 à 50 cm suivant Ø roue avant et sa position sur la fourche
B	Hauteur sol/siège arrière	41 à 45,5 cm suivant Ø roue arrière et sa position sur le support d'axe
C	Largeur hors-tout	Largeur d'assise + 22 cm
D	Hauteur siège/accoudoirs	Accoudoirs pivotants : 25 cm Accoudoirs réglables : 22,5 à 30 cm

Roues arrière 20" disponibles.

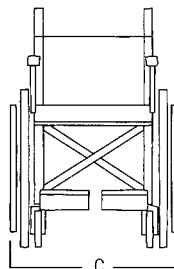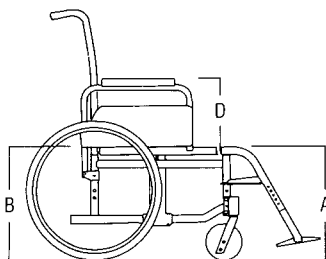

SUNRISE MEDICAL

13, r. de la Painguetterie - 37390 Chauceaux/Choisille
Tél : 02 47 55 44 00- Fax : 02 47 55 44 03